

創傷ケアケーススタディ 2

患者病歴: 70 歳男性、脳梗塞の為、半年間寝たきり状態、重度の 2 型糖尿病を 20 年間。
左足、踵後方部の褥瘡 3 ヶ月以上。
内科専門医から「ABI は 0.95 で血流チェックも済ませました。明日の朝、オペ室でデブリードメントをお願いします。」との依頼。

感染 : なし。悪臭なし。ドレナージなし。

創傷 : 左踵部: 黒色の乾燥した痂皮。



オペ前



オペ後



オペ後 3 日目

足創傷治療法 :

オペ室内での外科的デブリードメントを実施、踵骨後方の骨膜も削って培養へ出した。この時点では骨膜も硬く、感染はない様子であった。

シルバーガーゼ (Acticort) とハイドロサイト (Allevyn, 両方ともスミス・アンド・ネフュー製品) で無菌・湿潤環境を保ち、このドレッシングを 3 日ごとに交換した。

オペ 2 週間後:

治癒傾向だったものの、黒い壊死部が現れる。この時点でエキシマーレーザー PTA のできる病院への転院し、血管外科へコンサル。重度虚血下肢との判断で、レーザー PTA で血流再建オペを施行し、創傷部 SPP も 50 まで上昇、後日完治した。



オペ 2 週間後



2 週間後



レーザーオペ前

課題:

このケースでの失敗は、自身による血流のアセスメント (SPP, TcPO₂ など) を怠り、内科専門医の「ABI が 0.95 だから OK」というアセスメントを信頼したことにある。

長期の糖尿病患者は特に動脈硬化と石灰化が顕著で、普通のレントゲンに足の血管が見える事もよくある。基本的に、

糖尿病患者の ABI は信頼してはいけない。

特に 0.9 や 1.0 以上あっても、血流が十分ある、と安心しないように心がける必要がある。

この機会を使って、SPP の臨床意義を再確認

SPP (Skin Perfusion Pressure)は“皮膚灌流圧”と日本語訳され、よくレーザードップラーと呼ばれているが、サーモグラフィの機械をただレーザードップラーと名乗る他社製品もありため、区別する必要がある。ちなみに TcPO₂とは Transcutaneous Partial Pressure Oxygen の略で、40 年前に開発・発売された、多少古い技術を使った皮膚表面の血流モニター機械である。未だに TcPo₂ の機械を創傷ケアセンターで使用しているところもあるが、SPPの方が皮膚表面の血流アセスメントに正確である、ということはすでに証明済みである。

SPP (Skin Perfusion Pressure)の原理は？

レーザー技術で、皮膚毛細血管中の赤血球濃度を使用した血流計測法で、血圧計カフと繋がっているセンサーがレーザーを皮膚表面へ発射し、毛細血管内の赤血球の動きがレーザーを反射する。センサーが反射レーザー波を測定・皮膚灌流圧を計算する。

SPP(レーザードップラー)の利点は？

足関節動脈・上腕動脈血圧比(ABI)や微量の酸素(TcPO₂)の検査に比較して、正確、再現可能。
石灰化・動脈硬化の影響を受けない。
測定時間が短くて済む(5分以下)。
従来の TcPo₂ の血流検査機に比較し、簡易な操作で皮膚加温は不必要。
TcPo₂ の機械のように測定前のキャリブレーション不必要。
SPP 計測で波形を印刷し、カルテに貼ると保険点数 100 点加算できる。



新機種 “PAD 3000“
従来機 PV2000に比較し、計測を全自動化した。
よって、技術者ごとの計測値変動を排除できる。
測定後、自動的に結果レポートを製作、プリントすることが可能。
検査結果は PC 内に保存。
カフ、レーザーセンサーは個別、安価を実現。

主な SPP レーザードップラー使用法:

- ・創傷ケアセンターで創傷治癒率の予測
- ・バイパス手術前後の血流モニター
- ・重症虚血肢の診断
- ・足切断オペ前のプラン作り (中足骨切断 対 膝下切断 対 膝上切断 など)
- ・循環・心臓外科専門科への紹介前のテスト

SPP数値 結果:

30mmHg 以下、重度虚血肢、外科への血流再建依頼が必要
40mmHg 以上、創傷はおそらく治癒可能
40-60mmHg、軽度～中度の足肢虚血肢
70mmHg 以上、正常血流値

SPP の臨床研究:

Lo et al(2004), Loma Linda University(California)創傷センターでの研究
“創傷治癒的的中率の比較: SPP と TcPO₂(従来の血流計測技術)”

結果:

2003 年 83 人が治療され、75 人が治癒。

創傷治癒予測的的中率は SPP 90% (69/75 人)、TcPo₂ 65% (49/75 人)。

2004 年 99 人が治療され、88 人が治癒。


創傷治癒予測的的中率は SPP 92% (81/88 人)、TcPo₂ 67% (59/88 人)。

さらに細かく分析し、18 人の創傷患者を SPP と TcPO₂ で検査し、一年間の治癒可否的的中率を比較すると、SPP 群: 18 人中 17 名が SPP > 30mmHg で治癒可能と予測 ⇒ 12 人中 11 名が完全治癒 (92%)、3 人中 3 人が部分治癒 (100%)。

TcPo₂ 群: 18 人中 5 名が TcPo₂ > 30mmHg で治癒可能と予測 ⇒ そのうち 3 名が完全治癒 (25%)、3 名が部分治癒 (33%)。

と、SPP の創傷治癒可否予測の正確さが顕著に現れた。これによって、基本的に SPP は創傷治癒を予測する為の最も正確な計測機械として信頼できる。

以下のグラフを見ても分かるように、SPP では 30mmHg でくっきり治癒傾向が分かれているのに対して、同じ患者の ABI 数値では 0 から 2 までまちまちなのが分かる。これは ABI は血流アセスメントに(特に動脈硬化で 0.9 以上に上がった患者などは)信頼性が少ない、ということである。

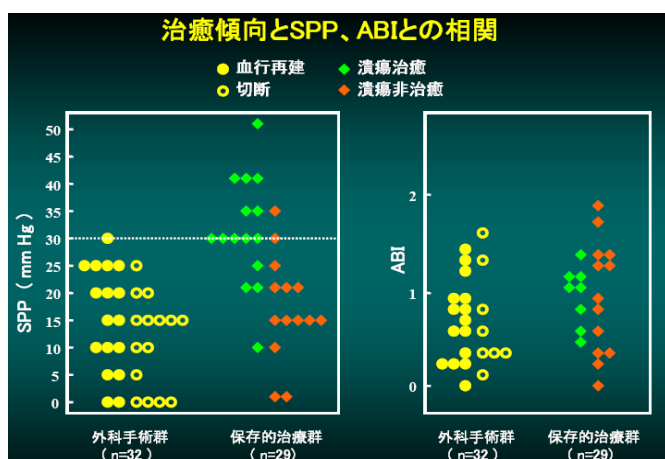

(Castronuovo et al. J. Vasc Surg 1997)

特に下肢創傷の場合、虚血状態によって治療方法や計画が変化する場合がある。

血流アセスメントは ABI と SPP から始め、ABI が 0.9 以下、もしくは SPP が 50 以下ならすぐに血管外科へコンサルトし、血流改善が図れるかどうかチェックすることが望ましい。

その他、バイパスや PTA、エキシマーレーザー PTA、Silverhawk などの血管内治療の前後にも、SPP の数値を比較することで、血流改善オペが成功したか、血流改善が維持されているか、などの判断に役立つ。